
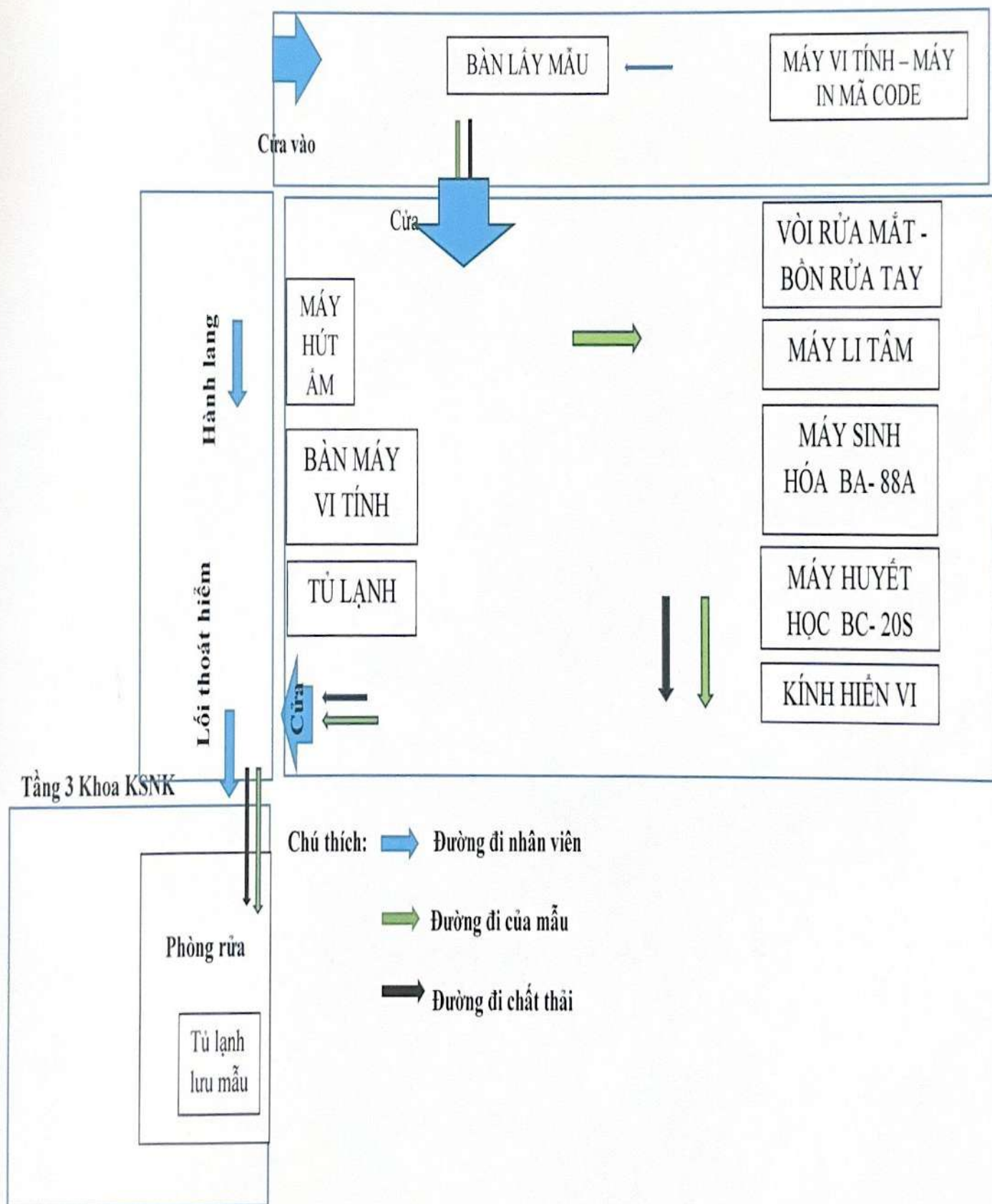


PHỤ LỤC 3b

SƠ ĐỒ PHÒNG XÉT NGHIỆM

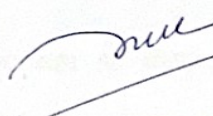

	BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN QUẢNG NGÃI KHOA XÉT NGHIỆM	Mã tài liệu:	XN.QTKT-
	QUY TRÌNH KHỬ NHIỄM PHÒNG XÉT NGHIỆM	Phiên bản:	1.0
		Ngày hiệu lực:	
		Số trang:	

	BIÊN SOẠN	KIỂM TRA	PHÊ DUYỆT
Họ và tên	Thái Thị Ngọc Muộn	Phạm Minh Đức	Nguyễn Kỳ Sương
Chức vụ	Trưởng khoa xét nghiệm	Trưởng phòng KHTH Tổ QLCL	Giám đốc
Chữ ký		 	
Ngày	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026

Theo dõi sửa đổi QTC

Phiên bản số	Vị trí sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Ngày xem xét/ sửa đổi	Người xem xét/sửa đổi

1. Mục đích

- Ngăn ngừa lây lan các bệnh nguy hiểm có nguồn gốc từ bệnh phẩm xét nghiệm tại các phòng xét nghiệm lây cho bản thân người xét nghiệm và cộng đồng.

2. Phạm vi áp dụng

- Tất cả nhân viên, học việc tại Phòng Xét nghiệm Bệnh viện Mắt Sài Quảng Ngãi.

3. Trách nhiệm

- Trưởng khoa xét nghiệm, nhân viên phụ trách an toàn sinh học chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình này.
- Tất cả nhân viên khoa xét nghiệm phải thực hiện đúng quy trình này

4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

4.1 Định nghĩa

Định nghĩa Khử nhiễm: là quá trình loại bỏ, tiêu diệt vi sinh vật; loại bỏ hay trung hòa các loại hóa chất nguy hiểm và chất phóng xạ.

4.2. Các chữ viết tắt CNK: chống nhiễm khuẩn

5. Nguyên lý

Vi khuẩn từ các bệnh phẩm và hóa chất độc hại sẽ được ngăn ngừa, loại bỏ bằng phương pháp khử nhiễm thích hợp.

6. Trang thiết bị và vật tư

6.1 Trang thiết bị

6.2 Dụng cụ

- Cồn 70 độ
- Trang phục bảo hộ (găng tay, áo choàng, mũ, khẩu trang, dép kín mũi, kính bảo vệ mắt)
- Bông gòn thấm nước- Giấy thấm hoặc khăn- Thùng rác thải

7. Kiểm tra chất lượng

Quá trình khử nhiễm bắt buộc phải tuân thủ theo quy trình chuẩn cần:

- Không dùng hóa chất hết hạn sử dụng
- Có sổ theo dõi khử nhiễm hàng ngày

8. An toàn

Phiên bản: 1.0	Trang: 2/5
Ngày hiệu lực:	

- Áp dụng các biện pháp an toàn chung khi xử lý mẫu và thực hiện xét nghiệm theo quy trình về an toàn xét nghiệm .

9. Nội dung thực hiện:

9.1. Thực hiện khử nhiễm trang thiết bị

- Trang thiết bị được lau bên ngoài bằng nước sạch.
- Khử nhiễm bên trong trang thiết bị: dùng giấy thấm dung dịch khử nhiễm, khử nhiễm thiết bị theo nguyên tắc từ khu vực sạch đến khu vực bẩn.- Giấy thấm nước tắm còn 70 độ sau khi khử nhiễm xong bỏ vào thùng rác thải y tế.

9.2. Khử nhiễm phòng xét nghiệm

- Hàng ngày, đầu giờ và cuối giờ làm việc phải thực hiện khử nhiễm phòng bằng tia cực tím; thời gian khử nhiễm bật đèn cực tím/15-30 phút.
- Nguyên tắc khử nhiễm bằng tia cực tím: đóng cửa phòng xét nghiệm, bật đèn cực tím, hết thời gian khử nhiễm mới mở cửa vào làm việc.

9.3. Khử nhiễm mặt bàn xét nghiệm

- Mặt bàn xét nghiệm sau khi thực hiện xong xét nghiệm phải thực hiện khử nhiễm bằng cồn 70 độ .
- Nguyên tắc khử nhiễm: dùng giấy thấm cồn 70 độ khử nhiễm mặt bàn theo nguyên tắc từ khu vực sạch đến khu vực bẩn.
- Bông thấm cồn 70 độ sau khi khử nhiễm xong bỏ vào thùng rác thải y tế.

9.4. Khử nhiễm các tube đựng bệnh phẩm, vật sắc nhọn

- Các vật sắc nhọn như lam kính, kim chích máu, kim tiêm, đầu col sau khi thực hiện xong xét nghiệm cho vào hộp đựng vật sắc nhọn chuyển về khoa CNK.
- Các tube chứa bệnh phẩm máu, sẽ được lưu 48 giờ tại tủ lưu mẫu của khoa, sau thời gian lưu trên sẽ được cho vào 2 túi đựng chất thải lây nhiễm chuyển đến khoa CNK để xử lý theo quy định.

10. Diễn giải và báo cáo kết quả

11. Lưu ý

12. Lưu trữ hồ sơ

- Nhật ký khử nhiễm

13. Tài liệu liên quan

Quy trình khử nhiễm phòng xét nghiệm	Mã tài liệu: XN.QTKT-
--------------------------------------	-----------------------

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Quy trình về an toàn xét nghiệm	XN.STAT-15
Bảng kiểm	BM01.QTKT-27

14. Tài liệu tham khảo

- Nguyên tắc và thực hành tại phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp I và cấp II của Viện Pasteur Nha Trang năm 2018.
- Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế, “Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.
- Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 31/12/2015 Quy định về quản lý chất thải y tế



Phiên bản: 1.0	Trang: 4/5
Ngày hiệu lực:	